

pain 

decompressione

# POLICARE

## Reliefer



***Per fare centro sugli obiettivi difficili!!!***



LIFE AND  IS BETTER!

Reliever® E' il nuovo concetto di ago motorizzato, per la decompressione discale nel trattamento dell'ernia contenuta.


Si applica facilmente come eseguire un esame discografico e il sistema non necessita di nessuna ulteriore attrezzatura o generatore ausiliare per il funzionamento.

La tecnica del Reliever è ad azione meccanica. Grazie al particolare sistema elicoidale dell'ago interno, è possibile visionare il materiale discale asportato, che si deposita nel serbatoio di contenimento.

L'impugnatura è studiata ergonomicamente al fine di consentire all'utilizzatore la perfetta sensibilità tattile.

L'ago discale introduttore è perfettamente studiato per il Reliever® ed un particolare innesto luer lock rende i due strumenti tra loro coassiali durante il funzionamento, evitando perdite del reperi anatomico.

La tecnica di decompressione discale realizzata con il Reliever, consente di eseguire la discografia provocativa nella stessa sede di intervento utilizzando l'apposito ago Day Needle non carotante.

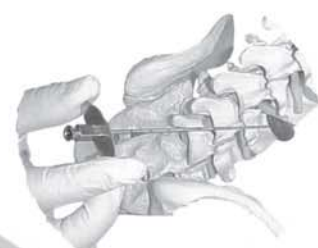

#### **BIBLIOGRAFIA**

Onik, G., et al., **Percutaneous lumbar discectomy using a new aspiration probe.** ANJR, 1985. 6: p.290-3.

Gill, K. and S. L. Blumenthal, **Clinical experience with automated percutaneous discectomy: the nucleotome system** Orthopedics, 1991. 14(7): p. 757-60.

Castro, W. H., et al., **Restriction of indication for automated percutaneous discectomy based on computed tomographic discography.** Spine, 1992. 17(10): p.1239-43.

Yeo, S. J. and B. K. Tay, **Clinical experience with automated percutaneous discectomy.** Singapore Med J, 1993. 34(4): p. 313-5.

Kenneth M. Alò, et al., **Percutaneous Lumbar Discectomy: One year Follow-up in an Initial Cohort of Fifty Consecutive Patients With Chronic Radicular Pain,** June 2005, Pain Practice

### **Applicazioni RELIEFER:**

- **Decompressione discale nel trattamento dell'ernia contenuta**
- **Black Disk**

### **Struttura elicoidale intracannula del RELIEFER**

Codice	Descrizione	Diametro	Lunghezza	Confezione
210-01	Reliever completo di kit introduttore	G.17	16 cm	1
122-2060	Day Needle - Ago Coudè per Discografia	G.20	15,2 cm	10
122-2080	Day Needle - Ago Coudè per Discografia	G.20	20,5 cm	10

**POLICARE**

Sede: Via Druento, 74  
10078 Venaria Reale (TO) - ITALIA  
Tel. +39 011 7397360  
Fax +39 011 4551315  
e-mail: info@policare.net  
www.policare.net

**Distribuito da:**